



# PRECISÃO PREVISIBILIDADE E CONFIANÇA.

Sistema de Ablação Emprint™  
com tecnologia Termoesfera™

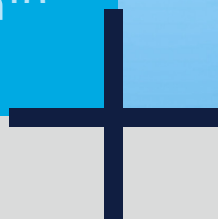

O sistema de ablação Emprint™ com tecnologia Termoesfera™ oferece previsibilidade. O controle térmico, de campo e de comprimento de onda garantem a formação de zonas de ablação esféricas precisas.

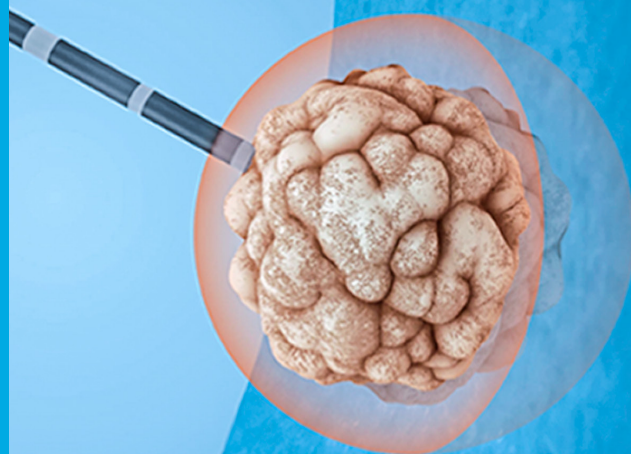

CONTROLE  
DE CAMPO

+



CONTROLE  
TÉRMICO

+



CONTROLE DE  
OMPRIMENTO DA ONDA

=



TECNOLOGIA  
TERMOESFERA™

Medtronic

# RESULTADOS PREVISÍVEIS. MAIOR CONFIANÇA REDUÇÃO DE TEMPO E CUSTOS.

- Agora você pode criar zonas de ablação esféricas e previsíveis.<sup>1</sup>
- Alcance resultados planejados com precisão e consistência em cada procedimento.
- Reduza potencialmente o tempo e os custos de procedimento por meio da capacidade de criar zonas de ablação esférica grandes com uma única antena.<sup>2</sup>



| INFORMAÇÕES PARA PEDIDO DO PRODUTO             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | TAMANHO        | CÓDIGO DO PEDIDO |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Gerador de Ablação com Tecnologia Termoesfera™ | Gerador de 100 W com interface do usuário intuitiva e ajustes de potência customizáveis para montagem e operação simplificadas.                            |                | CAGEN1           |
| Antena Percutânea com Tecnologia Termoesfera™  | Antena resfriada internamente em fibra de vidro                                                                                                            | Curta (15 cm)  | CA15L1           |
|                                                |                                                                                                                                                            | Padrão (20 cm) | CA20L1           |
|                                                |                                                                                                                                                            | Longa (30 cm)  | CA30L1           |
| Bomba de resfriamento                          | Bomba para resfriamento da antena que minimiza a condutividade térmica e proporciona maior controle e previsibilidade.                                     |                | CAPUMP1          |
| Cabo de Ablação Reutilizável                   | Cabo reutilizável que proporciona a entrega de energia de ablação.                                                                                         |                | CA190RC1         |
| Pedal                                          | O pedal permite a rápida ativação, reduzindo o tempo total do procedimento.                                                                                |                | RFASW            |
| Sonda de Temperatura Remota                    | Verifica a temperatura do tecido em tempo real e interrompe automaticamente a entrega de energia quando uma temperatura pré-definida é atingida no tecido. |                | RTP20            |

1. Baseado no relatório de teste interno em porco #R0043973, Teste de Desempenho In vivo do Sistema de Ablação por Micro-onda Emprint™ em um Modelo Porcino. Novembro de 2013.

2. IPU do dispositivo Emprint™: Antena Percutânea com Tecnologia Thermosphere™; 1058196.



Para saber mais,  
acesse nossa  
Central de Conteúdo