

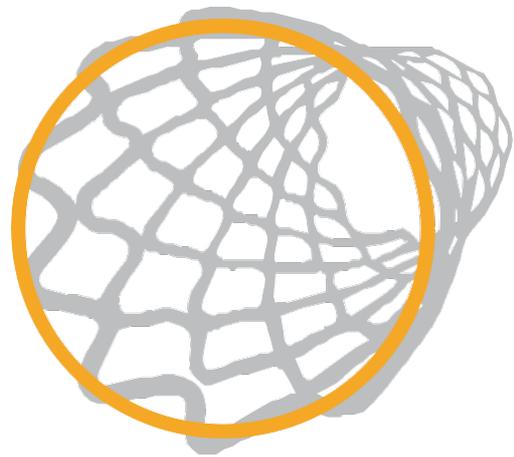
MAYORES CAPACIDADES DE EXPANSIÓN

El DES Resolute Onyx ahora tiene la marca CE para expandirse 0.25 mm adicionales, aplicables para toda la matriz de tamaños (2.0-5.0 mm)

Diseñado específicamente para los vasos extragrandes, como las bifurcaciones en el tronco coronario izquierdo, los diámetros de 4.5 y 5.0 mm ahora se expanden hasta 6.0mm.

Los diámetros de 2.0 mm se expanden hasta 3.5 mm para los tortuosos y estrechos vasos extrapequeños.

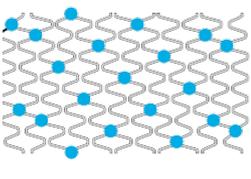
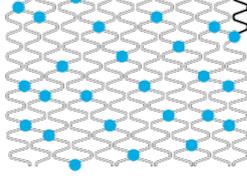
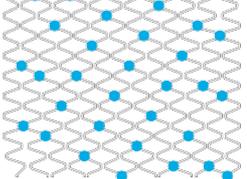
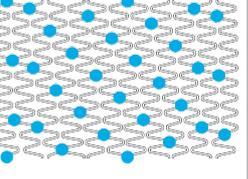
Fuerza radial sostenida e integridad estructural en la sobreexpansión.¹



El aumento de la expansión proporciona **adaptabilidad en el tamaño del stent** cuando se tratan lesiones complejas.

Diámetro (mm)	Longitud del Stent (mm)										MSID* (mm)
2.00	8	12	15	18	22	26	30	—	—	—	3.50 [†]
2.25	8	12	15	18	22	26	30	34	38	—	3.50 [†]
2.50	8	12	15	18	22	26	30	34	38	—	3.50 [†]
2.75	8	12	15	18	22	26	30	34	38	—	4.00 [†]
3.00	8	12	15	18	22	26	30	34	38	—	4.00 [†]
3.50	8	12	15	18	22	26	30	34	38	—	5.00 [†]
4.00	8	12	15	18	22	26	30	34	38	—	5.00 [†]
4.50	—	12	15	18	22	26	30	—	—	—	6.00 [†]
5.00	—	12	15	18	22	26	30	—	—	—	6.00 [†]

Especificaciones Técnicas

Característica por diámetro del stent	2.00, 2.25, 2.50	2.75, 3.00	3.50, 4.00	4.50, 5.00
Material núcleo/exterior	Platino-iridio/aleación de cobalto			
Dimensiones de espesor del puntal ¹ (in/ μ m)	0.0032/81	0.0032/81	0.0032/81	0.0036/91
Coronas	6.5	8.5	9.5	10.5
Expansion Máxima (MSID) (mm)	3.5[†]	4.0[†]	5.0[†]	6.0[†]
Diámetro máximo de rama lateral ¹ (mm)	3.7	3.9	3.8	4.9
Patrón de fusión	Fusión cada cuarta corona	Fusión cada quinta corona	Fusión cada cuarta corona	Fusión cada cuarta corona
				

CE
2797

^{*}Diámetro Interno Máximo del Stent.
[†]No posdilatar más allá del valor indicado.
¹Datos archivados en Medtronic.

Medtronic

Europa
Medtronic Intl. Trading SARL
Tel: 41.21.802.7000

Asia Pacífico
Medtronic Intl. Ltd.
Tel: 65.6436.5000

Latinoamérica
Medtronic
Tel: 786.709.4200

medtronic.com/Bifurcation

UC202101663 ML ©2020 Medtronic. Todos los derechos reservados. Medtronic y el logo de Medtronic son marcas comerciales de Medtronic. Para distribución solo en mercados en donde el stent coronario Resolute Onyx™ y la expansión de 0.25mm han sido aprobados. No para su distribución en Francia. 08/2020